



PROMA
medical

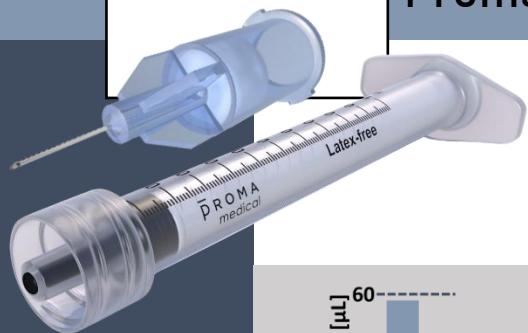

Low-Dead-Space Injektionssystem Proma inject Spritze + ZELOSTAT® 35G Nadel


Low-Dead-Space (LDS) Luer-Lock 1ml Spritze von Promalnject UND 35G 4mm Low-Dead-Space Injektionsnadel von ZELOSTAT® für Mikroinjektionen von Botulinumtoxin

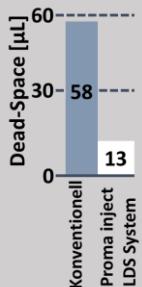

MEHR PRODUKT FÜR IHREN PATIENTEN

Die Low-Dead-Space Technologie basiert auf flexiblen, präzise ineinandergreifenden Komponenten, die den Totraum zwischen Nadel und Spritze ausfüllen und so die Produktverschwendungen drastisch reduzieren.

Ab der ersten Nadel lassen sich bis zu 45 μ l Botulinumtoxinlösung einsparen, bei dreimaligem Nadelwechsel sind es deutlich über 100 μ l (0,1ml), was mindestens einem zusätzlichen Injektionspunkt für Ihren Patienten entspricht.

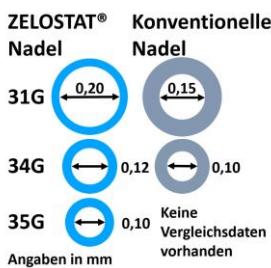

BEHALTEN SIE IHRE ROUTINE BEI

Mit einem Innendurchmesser von ca. 0,1mm bietet unsere 35G Nadel einen Durchfluss und Kolbendruck der einer herkömmlichen 34G Nadel ähnlich ist.

Der speziell entwickelte Stempel der LDS Spritze gleitet ohne zu blockieren und sorgt für hohe Kontrolle während der Injektion.


Behalten Sie Ihre Injektionstechnik bei – der Injektor spürt kaum einen Unterschied, der Patient fühlt weniger Nadel.



SICHERHEIT UND KOMFORT

Der Luer-Lock Adapter fixiert die Injektionsnadel fest auf der Spritze, sodass der Anwender mit einem größeren Druckbereich auf dem Kolben arbeiten kann, ohne das Risiko einzugehen, dass die Nadel sich löst.

Unsere 35G Nadel ist knapp 40% dünner* als herkömmliche 34G Nadeln und kann daher das Risiko von injektionsbedingten Nebenwirkungen reduzieren und so den Komfort für den Patienten während der Injektion steigern.

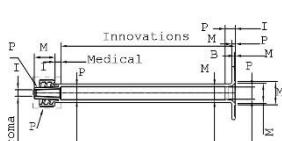

INNOVATION DIE SICH AUSZAHLT

Die Effizienz unserer Produktionsanlagen ermöglicht es uns, die Herstellungskosten drastisch zu senken und gleichzeitig die höchsten Standards der FDA und der EMA einzuhalten. Wir sind stolz darauf, die Kosteneffizienz unserer Innovationen an unsere Kunden weitergeben zu können.

Bestellen Sie hier:



Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Richtlinie und können Änderungen unterliegen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist und gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird. Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden oder erneut sterilisieren.

Promalnject ist Teil von PromaMedical GmbH
Werner-von-Braun-Straße 10
85640 Putzbrunn – Munich,
Germany

T: +49 (0)89 7474713-0
F: +49 (0)89 7474713-1
M: info@promainject.com
W: www.promainject.com

